
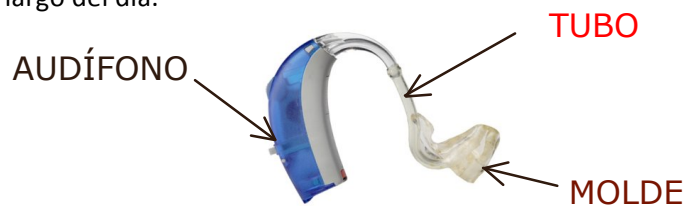


PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO **RV ALFA** DE AUDÍFONOS RETROAURICULARES.

Recuerde: Una correcta limpieza de las prótesis auditivas asegura que éstos funcionen de forma **correcta** y **estable**, **evita averías** y permite disfrutar de las cualidades óptimas de los audífonos durante toda su vida útil.

LIMPIEZA DIARIA.


- Eliminar con una toallita los restos de cerumen del molde.
- Comprobar que el tubo del molde está libre de restos de cerumen y el sonido puede salir correctamente.
- Si fuera necesario, eliminar con la perilla  las gotas de condensación que se acumulan en el tubo. Algunas veces esto puede tener que hacerse en más de una ocasión a lo largo del día.



- Revisar y limpiar la carcasa del audífono con un Kleenex o gamuza seca si se aprecian signos de suciedad.
- Por último, guardar el audífono **con el portapilas abierto** en la caja con la pastilla deshumidificadora durante toda la noche. (Recuerde, **¡las letras rojas hacia arriba!**)



LIMPIEZA SEMANAL.

- Una vez a la semana, separe el molde del audífono y lávelo con agua y jabón desinfectante. Si está padeciendo un episodio de otitis o infección, haga esta limpieza diariamente. Tras la limpieza, elimine los restos de agua del tubo con la perilla. 

MANTENIMIENTO MENSUAL.

- Una vez al mes deberá sustituir la pastilla antihumedad por una nueva. Excepcionalmente, si viaja a destinos con más humedad en el ambiente, la pastilla puede perder su color antes de este tiempo y deberá ser sustituida con antelación.



OTROS CUIDADOS.

- Es de vital importancia que el tubo que une el audífono con el molde **se renueve frecuentemente** (unos tubos en mal estado son una de las causas más frecuentes de realimentación en los audífonos retroauriculares) y ante los primeros síntomas de endurecimiento del mismo se debe cambiar. Será necesario hacerlo cada 2-3 meses. En RV ALFA le enseñaremos a cambiarlos y si lo prefiere, los cambiaremos tantas veces como sea necesario con acercarse al centro. Estos tubos siempre deberán estar previamente acodados (tener curva).



OPCIONAL: Puede asegurar sus Audífonos nuevos contra Daños, Rotura Accidental y Robo en el **PRIMER MES** de la compra de los mismos. El coste y las condiciones del seguro dependen del tipo de Audífono.
(Solicite más información en RV ALFA).